

PRIDE[®]
MOBILITY

Bruksanvisning



Säkerhetsanvisningar



WARNING! En auktoriserad Pride-leverantör eller kvalificerad tekniker måste utföra den första monteringen av denna elrullstol samt utföra samtliga procedurer i den här handboken.

Symbolerna nedan används på elrullstolen för att identifiera varningar, obligatoriska åtgärder och förbjudna åtgärder. Det är mycket viktigt att du läser och förstår dem till fullo.



WARNING! Indikerar ett potentiellt farligt tillstånd/situation. Underlåtenhet att följa angivna procedurer kan orsaka personskador, komponentskador eller funktionsfel. På produkten är denna ikon representerad av en svart symbol på en gul triangel med en svart kant.



OBLIGATORISKT! Dessa åtgärder bör utföras enligt anvisningar. Underlåtenhet att utföra obligatoriska åtgärder kan orsaka personskador och/eller skador på utrustningen. På produkten är denna ikon representerad av en vit symbol på en blå cirkel med en vit kant.



FÖRBJUDET! Dessa åtgärder är förbjudna. Dessa åtgärder bör inte utföras vid någon tidpunkt eller under några omständigheter. Att utföra en förbjuden åtgärd kan orsaka personskador och/eller skador på utrustningen. På produkten är denna ikon representerad av en svart symbol med en röd cirkel och rött snedstreck.

AVSEDD ANVÄNDNING

Den avsedda användningen av denna Pride Mobility Products-enhet är att erbjuda rörlighet för personer som är begränsade till en sittande position och som har kapacitet att köra en elrullstol.

PRODUKTER FÖR FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING



WARNING! Lagen begränsar denna enhet till försäljning av eller efter att den ordinerats av en läkare eller annan certifierad yrkesverksam individ, som enligt lag i den stat (endast USA) eller region där denna individ praktiserar, har licens för användning eller att ordinera användning av enheten.

Snabbpreferensinformation

Auktoriserad Pride-leverantör: _____
Adress: _____
Telefon: _____
Inköpsdatum: _____

OBSERVERA: Denna bruksanvisning har sammanställts baserat på de senaste specifikationerna och produktinformationen som fanns tillgänglig vid tidpunkten för publicering. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar när de blir nödvändiga. Eventuella förändringar av våra produkter kan orsaka små variationer mellan illustrationerna och förklaringarna i den här handboken och den produkt du har köpt. Den senaste/aktuella versionen av den här handboken finns på vår hemsida.

OBSERVERA: Denna produkt är kompatibel med kraven och direktiven WEEE, RoHS och REACH.

OBSERVERA: Denna produkt uppfyller IPX4-klassificering (IEC 60529).

OBSERVERA: Elrullstolen och dess komponenter är inte gjorda av naturgummilatex. Rådgör med tillverkaren om eventuella reservdelar.

Introduktion.....	4
Säkerhet	5
Din elrullstol.....	7
Montering/demontering	11
Komfortjusteringar	14
Batterier och laddning	17
Skötsel och underhåll	22

RÅDGIVANDE UTTALANDE OM VISSA KOMPONENTER INBYGGDA AV TREDJEPARTTILLVERKARE I FÄRDIGA STOLAR: När stolthållare, sittplatser eller andra komponenter ingår i en färdig stol som tillverkas eller monteras av någon tredje part, är den tredje parten ansvarig för att säkerställa säkerheten, funktionaliteten och den juridiska efterlevnaden av den färdiga karmstol. Pride lämnar inget uttalande om säkerheten, funktionaliteten eller lagstadgad efterlevnad av den färdiga elstol eller dess komponenter tillverkade av tredje part. Medan Pride gör allt för att försäkra oss om att våra komponenter distribueras på ett ansvarsfullt sätt, påminns tillverkare, distributörer och konsumenter om att färdiga elstolar måste uppfylla en mängd standarder och krav för statlig säkerhet och funktionalitet.

Om det är nödvändigt att fysiskt modifiera en stol, inklusive tillägg av komponenter från tredje part, för att tillgodose de medicinska behoven hos barnstolens passagerare, en riskbedömning i enlighet med ISO 14971, som beskrivs i ISO_DIS_7176-19 (preliminär release) , ska utföras.

Ändringar av elstolar som sannolikt kommer att påverka överensstämmelse och riskbedömning inkluderar men är inte begränsade till: flyttning av fästpunkten; sänka ryggstödshöjden; förkortning av sittlängden; lägga till sekundära hållningar som inte är ordentligt fastsatta på elstolen; lägga till komponenter som har skarpa kanter (dvs. kanter med en radie som är mindre än 0,08 tum [2 mm]); eller någon förändring som äventyrar den elektriska stolens strukturella integritet.

Säkerhet

VÄLKOMMEN till Pride Mobility Products (Pride). Den elrullstol du har köpt kombinerar toppmoderna komponenter med **säkerhet**, komfort och stilren design i åtanke. Vi är övertygade om att dessa designegenskaper kommer att erbjuda de bekvämligheter du förväntar dig under dina dagliga aktiviteter. När du satt dig in i hur du på ett **säkert** sätt kan använda och ta hand om din elrullstol, bör du kunna se fram emot årtal av problemfri användning.

Läs och följ alla instruktioner, varningar och anvisningar i den här bruksanvisningen innan du försöker använda din elrullstol för första gången. Du måste också läsa alla instruktioner, varningar och anvisningar som finns i eventuella kompletterande instruktionsböcker för kontrollenheten som följde med din elrullstol före första användning. Din **säkerhet** hänger på att du, liksom din leverantör, vårdgivare eller sjukvårdspersonal använder, gott omdöme.

Om det finns information i den här handboken som du inte förstår, eller om du behöver ytterligare hjälp för installation eller drift, kontakta din auktoriserade Pride-leverantör. **Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning och de som finns på din elrullstol kan leda till personskador och/eller skador på elrullstolen, inklusive att garantin upphör att gälla.**

Köpeavtal

Genom att acceptera leverans av denna produkt, intygar du att du inte kommer att förändra eller modifiera denna produkt, avlägsna eller göra några skydd, skärmar eller andra säkerhetsfunktioner på denna produkt obrukbara eller osäkra; låta bli, vägra eller försumma att installera eventuella eftermonteringssatser som då och då tillhandahålls av Pride för att förbättra eller bibehålla säker användning av denna produkt.

Frakt och leverans

Innan du använder din elrullstol, se till att leveransen du mottagit är komplett, eftersom vissa komponenter kan vara individuellt förpackade. Om du inte fått en komplett leverans, kontakta din auktoriserade Pride-leverantör omedelbart. Om skador har uppstått under transporten, antingen på förpackningen eller innehållet, kontakta det ansvariga leveransföretaget.

OBSERVERA: Om du någonsin förlorar eller tappar bort din kopia av den här bruksanvisningen, kontakta oss så skickar vi gärna en ny till dig omedelbart.

Produktsäkerhetssymboler

Symbolerna nedan används på elrullstolen för att identifiera varningar, obligatoriska åtgärder och förbjudna åtgärder. Det är mycket viktigt att du läser och förstår dem till fullo.

OBSERVERA: Fler varningar identifieras och förklaras i säkerhetsguiden som medföljer din elrullstol. Bekanta dig med alla varningar och säkerhetsinformationen som finns i säkerhetsguiden och konsultera den resursen ofta.



Läs och följ informationen i bruksanvisningen.



Låst och i körläge.

Placera enheten på plan mark och stå vid sidan när du byter från körläge till frihjulsläge eller frihjulsläge till körläge.

Olåst och i frihjulsläge.



Utrustning av Klass II



Elrullstolens informationsetikett



Tillverkad i



Ta inte bort anti-tipp hjulen.

Allmänna riktlinjer



OBLIGATORISKT! Använd inte din nya elrullstolen för första gången utan att först läsa och förstå hela denna bruksanvisning och säkerhetsguiden.

Din elrullstol är ett högteknologisk fordon som designats för att öka din rörlighet och förbättra ditt liv. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter för att bäst tillgodose var elrullstolenanvändares individuella behov. Kom ihåg att ansvaret för det slutliga valet och inköpsbeslutet om vilken typ av elrullstolen som ska användas är elrullstolans användares, om denne kan fatta ett sådant beslut, och hans sjukvårdspersonal (dvs. läkare, fysioterapeut etc.).

Innehållet i denna bruksanvisning förutsätter att en expert på mobilitetsfordon har monterat elrullstolen åt användaren på ett korrekt sätt, och har assisterat den förskrivande sjukvårdspersonalen och/eller den auktoriserade leverantören i instruktionsprocessen för användning av produkten.

Det finns vissa situationer, inklusive vissa medicinska tillstånd, där elrullstolenanvändaren måste öva på att använda elrullstolen med en utbildad skötare närvarande. En utbildad skötare kan definieras som en familjemedlem eller vårdpersonal som är specialutbildad för att stöda en elrullstolenanvändare i olika dagliga aktiviteter.

När du börjar använda din elrullstol under dina dagliga aktiviteter kommer du förmodligen att stöta på situationer där du behöver lite övning. Ta den tid du behöver och du kommer snart att ha full och säker kontroll när du manövrerar dig genom dörröppningar, på och av hissar, upp och nedför ramper, och över måttlig terräng.

Här är några försiktighetsåtgärder, tips och andra säkerhetsaspekter som hjälper dig att bli van vid att använda elrullstolen säkert.

Säkerhetskontroll före körning

Lär känna din elrullstol egenskaper och möjligheter. Vi rekommenderar att du utför en säkerhetskontroll före varje användning för att se till att din elrullstol fungerar smidigt och säkert.

Utför följande inspektioner innan du använder din elrullstol:

- Kontrollera korrekt däckinflation. Håll men överskrid inte psi-/bar-/kPa-lufttrycksklassificeringen som anges på varje däck om utrustad med pneumatiska däck.
- Kontrollera alla elektriska anslutningar. Se till att de sitter åt och inte visar spår av korrosion.
- Kontrollera alla kontrollenhetsanslutningar till strömbasen. Se till att de är ordentligt säkrade.
- Kontrollera bromsarna. Se "Skötsel och underhåll".
- Kontrollera batteriladdningen. Se "Batterier och laddning".
- Se till att de manuella spakarna för frihjulsläge är i körläge innan du sätter dig på elrullstolen.


OBSERVERA: Om du upptäcker ett problem, kontakta din auktoriserade Pride-leverantör för hjälp.

De iGo+®

iGo+® är en elrullstol som du enkelt kan fälla ihop för transport eller lagring. Batterilådan glider in på baksidan av strömbasen. **Se figur 1 och 2** för elrullstolskomponenter.

Identifieringsnyckel


- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Ryggstöd | 7. Förvaringsutrymme |
| 2. Armstöd | 8. Länkhjul |
| 3. Mugghållare | 9. Körhjul |
| 4. Sätbas | 10. Anti-tipp hjul |
| 5. Kontrollenhet | 11. Hopfällnings- och låsmekanism |
| 6. Fotstöd | |

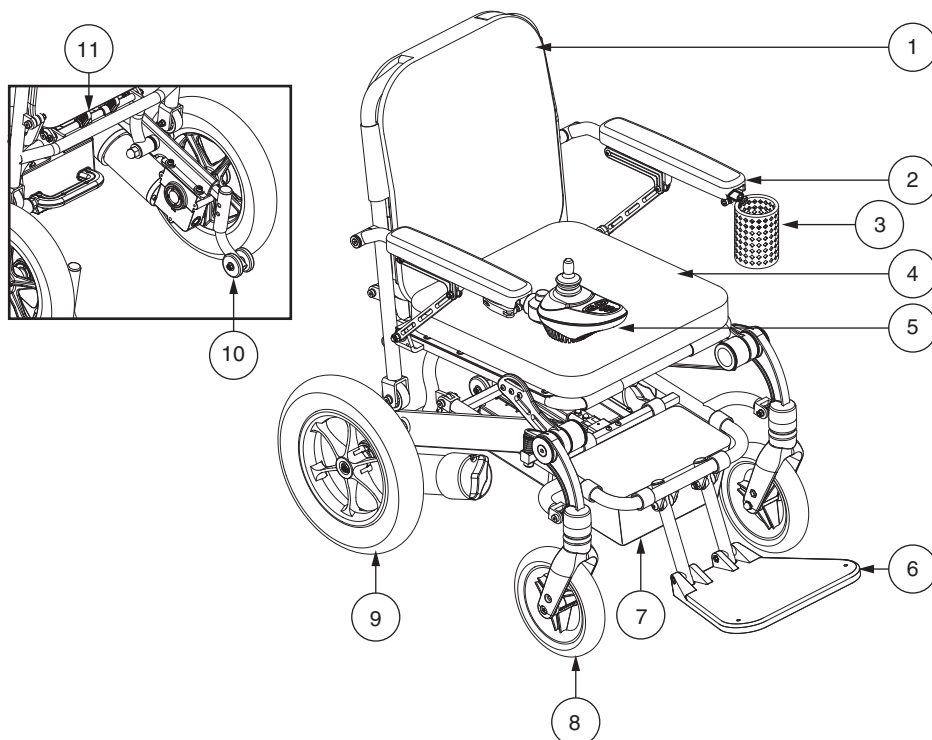

Figur 1. iGo+®

Identifieringsnyckel

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Manuell spak för frihjulsläge | 4. Förvaringsutrymme |
| 2. Batterilåda | 5. Strömbrytare/batteriströmbrytare |
| 3. Anti-tipp hjul | 6. Batteriladdarens anslutning |

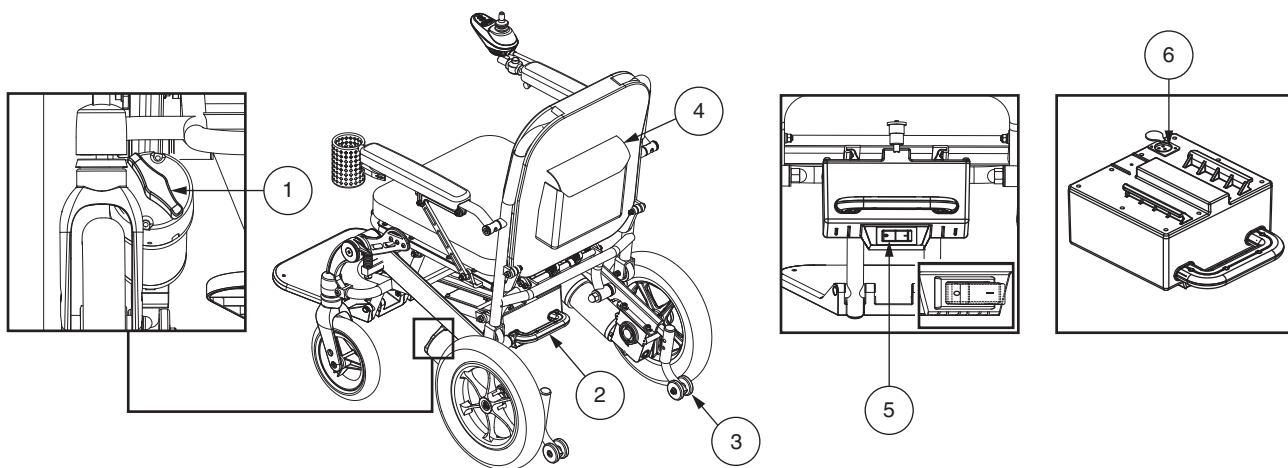

Figur 2. Strömbas

Elkomponenter

Elkomponenterna är placerade på strömbasen. Huvudbrytaren är placerad på baksidan av batterilådan, under handtaget. **Se figur 2.**

Kontrollenhetskontakt: Det är här kontrollenheten ansluter till strömbasen. Varje kontrollenhet använder olika kablar. Oavsett vilken typ av kontrollenhet som används, måste kabeln fästas vid elrullstolen och får inte dras längs golvet.

Batterilådans laddaranslutning: Denna gör att du kan ladda batteriet när batterilådan är borttagen från strömbasen. Se "Batterier och laddning".

OBSERVERA: Batteriströmbrytaren fungerar också som huvudströmbrytare. Se nedan för mer information.

Batteriströmbrytare: Denna strömbrytare slår på och stänger av batteriet. När strömbrytaren är i läget "I" är batteriet på. Batteriet kan stängas av för långtidsförvaring genom att byta till "0"-läget.

Huvudströmbrytare: Huvudströmbrytaren är en inbyggd säkerhetsfunktion i din elrullstol. När batteriet och motorerna är kraftigt ansträngda (t.ex. från alltför stora belastningar), slås huvudströmbrytaren av för att förhindra skador på motorerna och elektroniken. Om strömbrytaren slås av, låt din elrullstol "vila" i ungefär en minut. Tryck sedan in strömbrytarknappen/batteriströmbrytaren till läget "0" och sedan tillbaka till läget "I". Slå på kontrollenheten och fortsätt normal drift. Om huvudströmbrytaren fortsätter att slås av upprepade gånger, kontakta en auktoriserad Pride-leverantör.

Manuella spakar för frihjulsläge

För din bekvämlighet har din elrullstol en manuell spak för frihjulsläge på varje motor. Manuella spakar för frihjulsläge gör att du kan inaktivera körsystemet för att manövrera elrullstolen manuellt.



WARNING! Använd inte elrullstolen medan körmotorerna är urkopplade! Koppla inte ur körmotorerna när elrullstolen står i lutning eller i en backe, eftersom enheten kan rulla iväg på egen hand! Aktivera endast frihjulsläget på en plan yta.



WARNING! Det är viktigt att komma ihåg att när din elrullstol är i frihjulsläge, är bromssystemet urkopplat.

WARNING! Koppla inte ur körmotorerna medan elrullstolen används.

OBSERVERA: Pride rekommenderar starkt att du inte laddar batteriet medan elrullstolen befinner sig i frihjulsläge.

OBSERVERA: Du måste stänga av strömmen innan du inaktiverar körsystemen. Annars kan du få en felkod på kontrollenheten. För att rensa den här koden, stäng av kontrollenheten och placera elrullstolen i körläge. Slå sedan på kontrollenheten. Felmeddelandet bör vara borta. Om inte, kontakta en auktoriserad Pride-leverantör.

Att koppla in eller koppla ur körmotorerna:

1. Hitta spaken på varje motor. **Se figur 3.**
2. Vrid de manuella spakarna för frihjulsläge utåt för att koppla ur körmotorerna (frehjulsläge). **Se figur 3.**
3. Vrid de manuella spakarna för frihjulsläge inåt för att koppla in körmotorerna (körläge). **Se figur 3.**




WARNING! Använd inte spakarna för frihjulsläge som fästpunkter för att säkra denna produkt.

Anti-tipphjul

Anti-tipphjulen är en integrerad och viktig säkerhetsfunktion i din elrullstol. De är fästa vid stolsramens baksida. **Se figur 2 och 3.**



FÖRBJUDET! Ta inte bort anti-tipphjulen eller modifiera din elrullstol på något sätt som inte är godkänt av din leverantör.

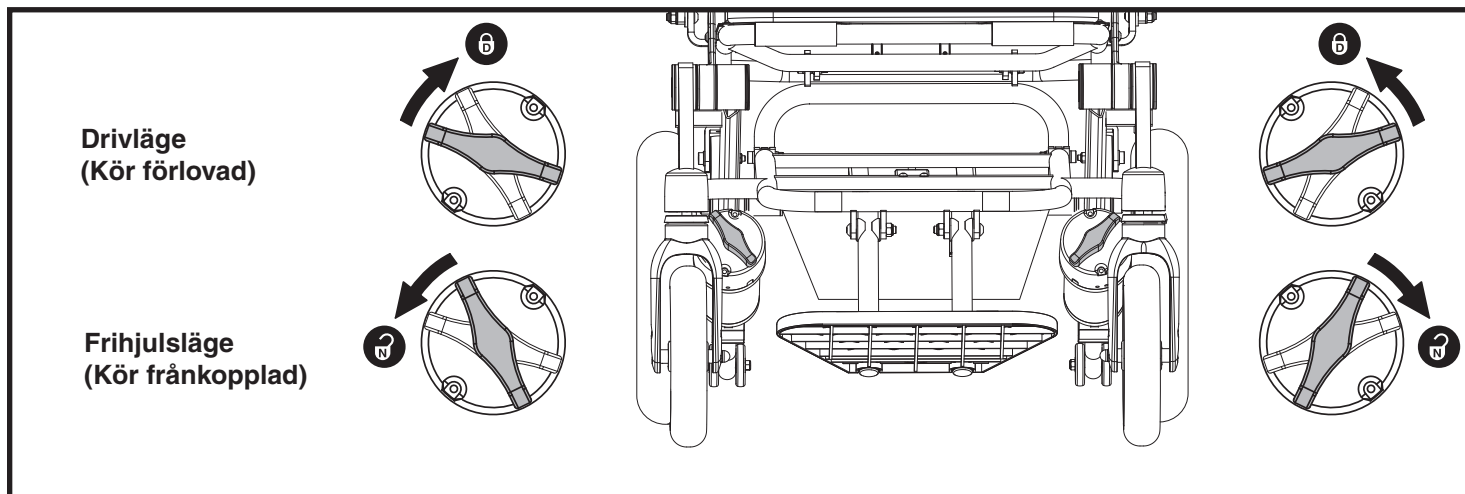

Figur 3. Manuella spakar för frihjulsläge

Förvaringsutrymmen

Din elrullstol är utrustad med två förvaringsutrymmen. De finns på ryggstödet och mellan sätet och fotstödet.

WARNING! Ingen personlig egendom eller värdesaker bör förvaras i något förvaringsutrymme och lämnas obevakat.



WARNING! Förvaringsutrymmet på baksidan av ryggstödet är till för små personliga föremål. Undvik att förvara vassa föremål i förvaringsutrymmena.

WARNING! Transportera inte tungt bagage som väger mer än 2,3 kg (5 lb.) i förvaringsutrymmena. Att transportera eller binda fast bagage som överstiger 2,3 kg (5 lb.) i förvaringsutrymmena kan påverka tyngdpunkten, vilket resulterar i vältning eller fall.

Första monteringen

Din elrullstol kan kräva viss monteringen antingen före första användning eller efter transport. Den kan också kräva nedmontering för att göra vissa komfortjusteringar.


OBS! För videoinstruktioner om installation av barnstol, besök <https://www.youtube.com/watch?v=rTmuEi1jqLs> eller skanna QR-koden som visas med din smartphone-enhet.



OBSERVERA: Alla låsmuttrar i nylon som tas bort under regelbundet underhåll, monteringen eller nedmontering av din elrullstol måste bytas ut mot nya muttrar. Låsmuttrar i nylon får inte återanvändas eftersom det kan skada nyloninsatsen, vilket leder till en mindre säker passform. Låsmutterersättningar i nylon finns hos lokala järnhandlare eller via din auktoriserade leverantör.

Att montera din elrullstol:

1. Fäll ut elrullstolen. Se "Hopfällning och utfällning".
2. Montera batterilådan i batterifacket genom att skjuta in den horisontellt mot baksidan av ramen under sätet tills säkringsstiftet klickar på plats. **Se figur 4.**

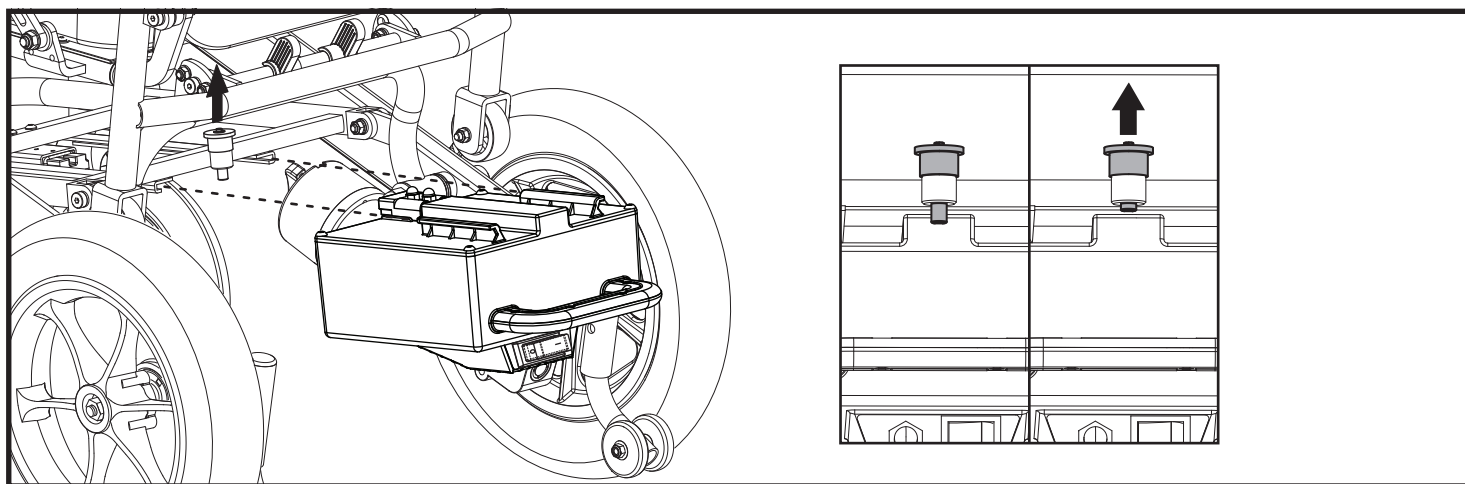


Figur 4. Borttagning/montering av batterilåda

3. Vik upp armstöden.
4. Sätt in kontrollenheten i armstödet och dra åt tumskruven och lås sedan snabbhandtaget. **Se figur 6.** Haka fast kontrollenhetens kablar i låsklämmorna. **Se figur 10.**

OBSERVERA: Kontrollera att kontrollenhetens kablar inte kläms fast vid hopfällning och utfällning av din elrullstol, som visas i Figur 5. Om de kläms fast har kabeln vridits före monteringen. Montera ned och ta bort kontrollenhetens kablar. Se sedan till vid ominstallation att din elrullstol kan fällas ihop och fällas ut utan att skapa nyppunkter på kabeln.

5. Sätt i mugghållaren i det andra armstödet och dra åt tumskruven och lås sedan snabbhandtaget.
6. Fäst sittdynan och ryggstödet på stolen genom att fästa samman kardborrebanden.
7. Ta ut batteriladdaren ur lådan och anslut den till kontrollenhetens laddaranslutning. Följ laddningsinstruktionerna som är tryckta på laddaren. **Se figur 13.**

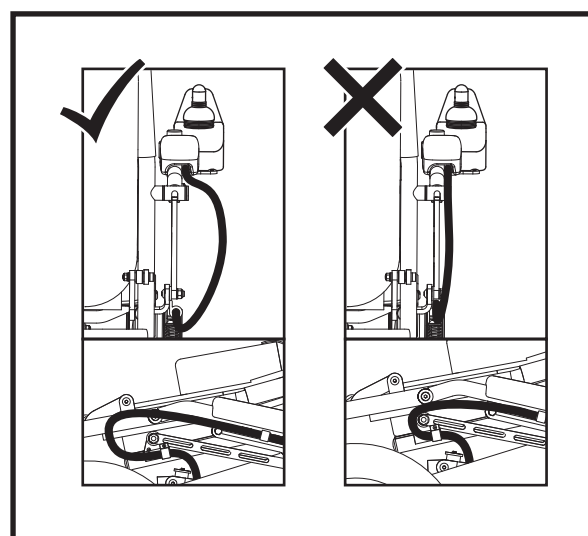

Figur 5. Kontrollenhetens kabelns nyppunkt




OBLIGATORISKT! Förhindra skador på kontrollenhetskabeln! Undvik att dra kontrollenhetskabeln på utsidan av armstödsdynan. Dra kabeln under armstödet eller mot insidan av armstödsdynan. Använd rätt fästpunkter för kontrollenhetskabeln för att förhindra att kabeln fastnar i däcken, kläms i sätesramen eller skadas när du passerar genom dörröppningar.

Demontering

Elrullstolen monteras ned i fyra komponenter: basen, batterilådan, mugghållaren och kontrollenheten.

Att montera ned elrullstolen:

1. Stäng av strömmen till kontrollenheten.
2. Placera elrullstolen i köräge, om den inte redan är i köräge. Se "Din elrullstol".
3. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruv och ta sedan bort kontrollenheten från armstödet. **Se figur 6.**
4. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruv och ta sedan bort mugghållaren från det andra armstödet.
5. Ta tag i batterilådans handtag och lyft upp låsstiftet för att koppla loss lådan från strömbasen och skjut sedan ut batterilådan ur strömbasen. **Se figur 4.**

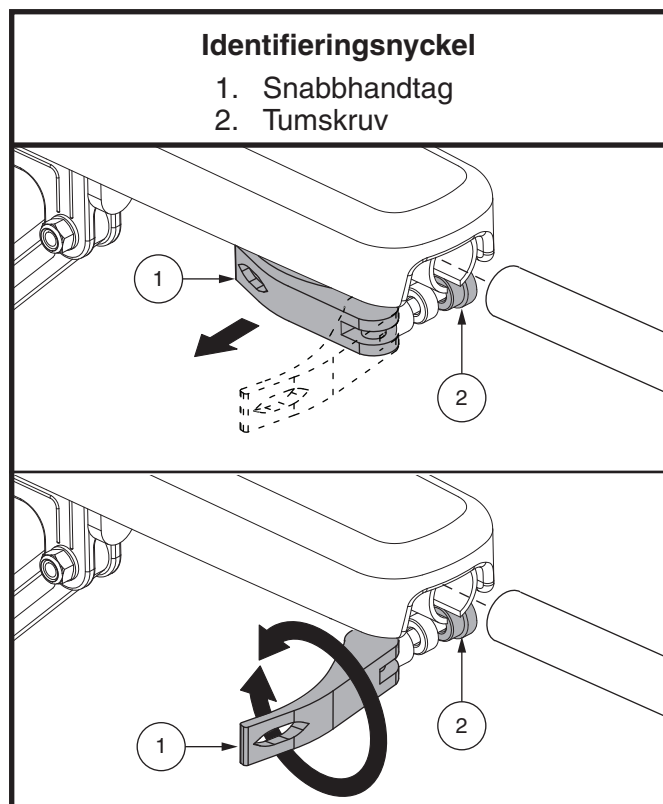

Figur 6. Montering/demontering av armstödskomponenter

Hopfällning och utfällning

Din elrullstol kan fällas ihop för enkel transport och förvaring.

Att fälla ihop elrullstolen:


1. Vik fotstödet uppåt mot elrullstolens säte.
2. Stå bakom stolen och lokalisera låsmekanismen. **Se figur 1.**
3. Placera en hand ovanpå ryggstödet och dra det mot dig medan du klämmer ihop låsstiften. **Se figur 7.**
4. När låsstiften separeras från plattorna på vardera sidan, tryck försiktigt ryggstödet framåt och nedåt. Lossa låsmekanismen och fortsätt att fälla ihop stolen tills låsmekanismen hakar fast i det hopfällda läget.

Att fälla ut elrullstolen:


1. Stå bakom stolen och lokalisera låsmekanismen. **Se figur 1.**
2. Placera en hand ovanpå ryggstödet och tryck det nedåt medan du klämmer ihop låsstiften. **Se figur 8.**
3. När låsstiften separeras från plattorna på vardera sidan, tryck försiktigt ryggstödet uppåt. Lossa låsmekanismen och fortsätt att fälla upp stolen tills låsmekanismen hakar fast i det uppfällda läget.
4. Fäll ut fotstödet.



WARNING! För att undvika skador, se till att ryggstödet är helt utfällt och att låsmekanismen är aktiverad innan du sätter dig i din elrullstol.

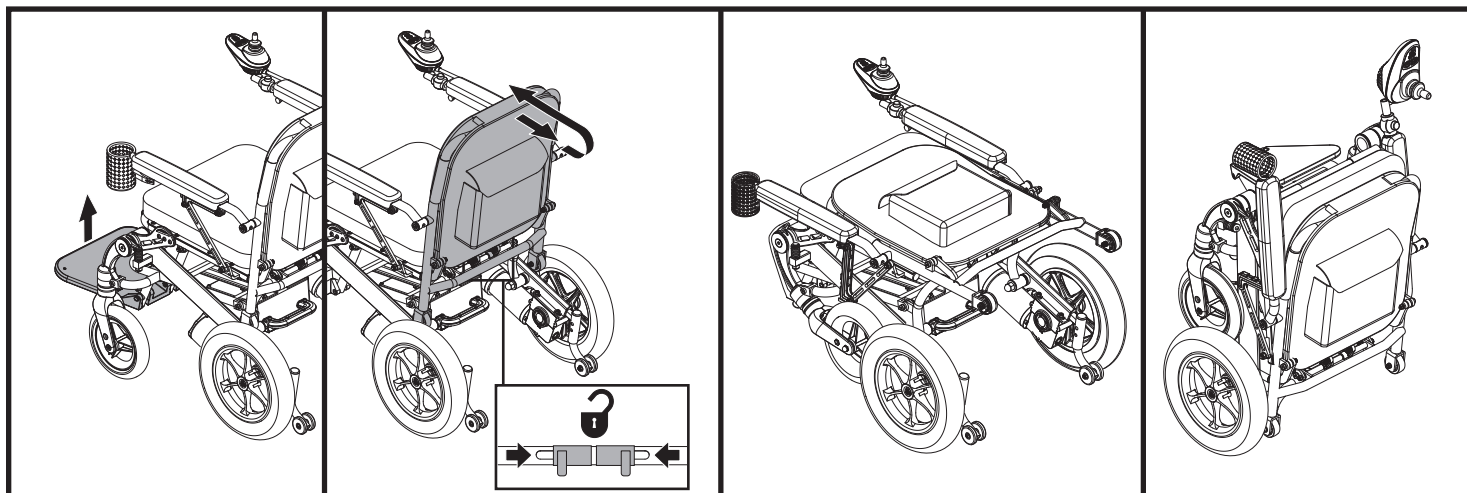

Figur 7. Att fälla ihop iGo+®

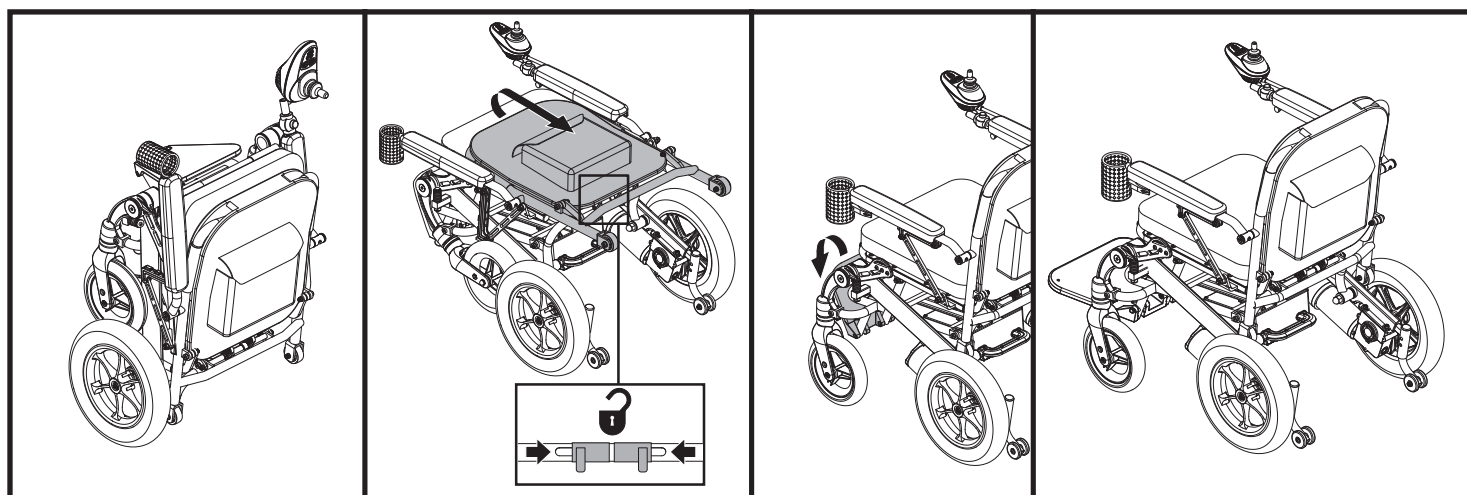

Figur 8. Att fälla ut iGo+®

Komfortjusteringar

Efter att ha lärt känna hur din elrullstol fungerar, kan du behöva göra vissa justeringar för att öka din komfort. Följ stegen nedan för att göra komfortjusteringar.

WARNING! Tyngdpunkten i din elrullstol var fabriksinställd i en position som uppfyller behoven hos majoriteten av användarna. Din auktoriserade Pride-leverantör har utvärderat din elrullstol och gjort alla nödvändiga justeringar för att passa dina specifika krav. Ändra inte din säteskonfiguration utan att först kontakta Pride Mobility Products eller din auktoriserade Pride-leverantör.



WARNING! Vissa av elrullstolens komponenter är tunga. Du kan behöva assistans av annan person för att lyfta eller bära dem. Se specifikationstabellen för specifika komponentvikter innan du monterar ned elrullstolen.

WARNING! Be passageraren stiga av elrullstolen innan du gör några justeringar.


Mugghållarens placering

Du kan placera mugghållaren för användning antingen till vänster eller höger.

För att ändra mugghållarens position:

1. Stäng av strömmen till kontrollenheten.
2. Lossa snabbhandtaget och tumskraven. **Se figur 9.**
3. Skjut ut mugghållaren ur armstödet.
4. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskraven på det andra armstödet.
5. Placera mugghållaren på det andra armstödet.
6. Dra åt tumskraven och lås snabbhandtaget för att säkra kontrollenheten.

OBSERVERA: Mugghållare och kontrollenhet kan inte fästas vid samma armstöd.

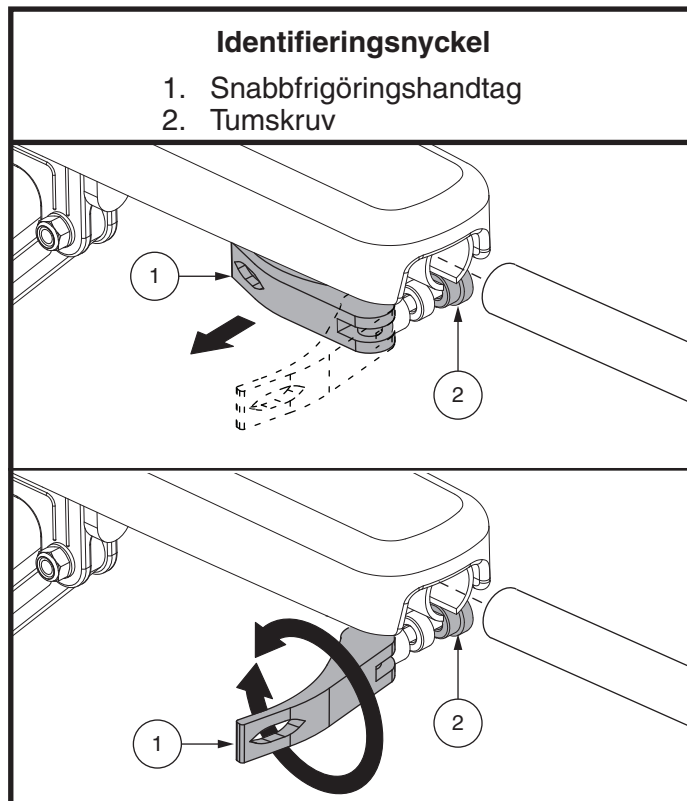

Figur 9. Armstödet borttagning/installation

Kontrollenhetens placering

Du kan placera kontrollenheten för användning antingen till vänster eller höger. Du kan också justera kontrollenhetens positionsvinkel.



VARNING! Placera inte kontrollenhetskabeln så att den kan klämmas i sätesramen eller strömbasramen.


För att ändra kontrollenhetens position:

1. Stäng av strömmen till kontrollenheten.
2. Klipp av buntbanden som säkrar kontrollenhetskabeln till ramen.
3. Tabort kontrollenhetskabeln från låsklämmorna. Ta loss låsklämmorna och montera dem på andra sidan. **Se figur 10.**
4. Vik upp armstödet där kontrollenheten sitter. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruven. **Se figur 9.**
5. Skjut ut kontrollenheten från armstödet.
6. Dra kontrollenhetskabeln under sätesbasen till den andra sidan.
7. Lossa snabbhandtaget och lossa tumskruven på det andra armstödet.
8. Placera kontrollenheten på det andra armstödet.
9. Dra åt tumskruven för att säkra kontrollenheten och lås snabbhandtaget.
10. Vik upp armstödet.
11. Använd buntband för att fästa kontrollenhetskabeln i ramen och haka fast kontrollenhetskabeln i låsklämmorna. **Se figur 10.** Se till att armstödet kan höjas och sänkas fritt utan någon spänning på kabeln för att inte riskera att låsklämmorna lossnar.


OBSERVERA: Kontrollenhetsfästenas motvikt kommer att ändra kontrollenhetens positionering något när den används på vänster armstöd.

För att ändra kontrollenhetens vinkel:

1. Håll knappen för kontrollenhetsvinkel intryckt och vrid kontrollenheten åt vänster eller höger till önskat läge. **Se figur 11.**
2. Släpp knappen och se till att den klickar för att låsa fast kontrollenheten på plats. Se till att kontrollenhetskabeln inte är för hårt spänd.

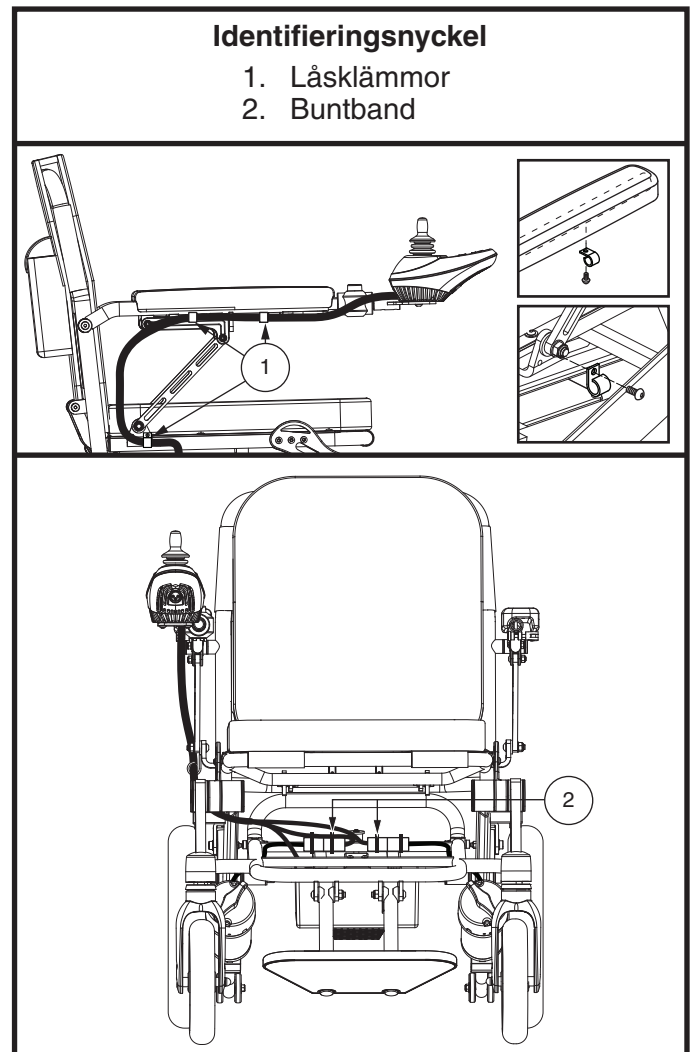

Figur 10. Kontrollenhetens placering

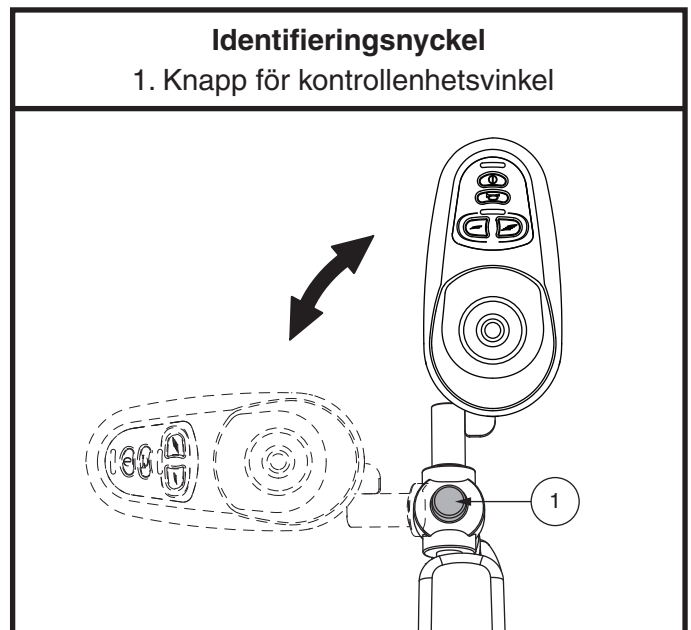

Figur 11. Justering av kontrollenhetens vinkel


Positioneringsbälte

Din elrullstol kan vara utrustad med ett positioneringsbälte som kan justeras för användarkomfort. **Se figur 12.** Positioneringsbältet är utformat för att hjälpa till att stödja användaren så att hen inte glider ned eller framåt i sätet. Positioneringsbältet är inte konstruerat för att användas som en fasthållningsanordning.



WARNING! Positioneringsbältet är inte avsett att användas som säkerhetsbälte i ett motorfordon. Din barnstol är inte heller lämplig för användning som säte i något fordon. Alla som reser i ett fordon bör vara ordentligt bältade i säten som godkänts av fordonstillverkaren.

WARNING! Positioneringsbältet ska alltid säkras. Låt aldrig positioneringsbältet hänga eller dra på golvet eftersom det kan bli intrasslat.

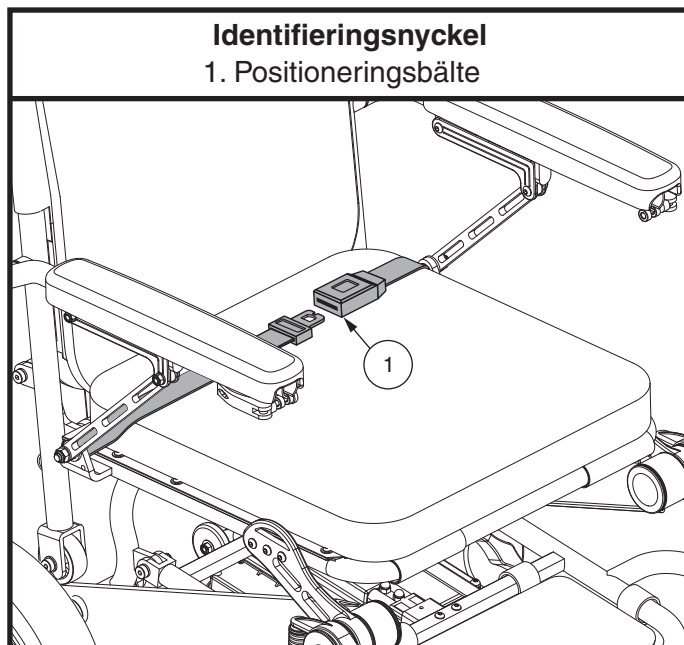

Figur 12. Justering av positioneringsbälte

Att justera positioneringsbältet:

1. Sätt in metallfliken på höger sida av bältet i plasthöljet på motsatt rem tills du hör ett klick. **Se figur 12.**
2. Dra i remmen på höger sida av bältet tills det sitter säkert, men inte så tätt att det orsakar obehag.

För att frigöra positioneringsbältet:

1. Tryck på tryckknappsmekanismen på plasthuset.

OBLIGATORISKT! Se till att positioneringsbältet är ordentligt fastsatt i elrullstolen och justeras för användarkomfort före varje användning.



OBLIGATORISKT! Inspektera positioneringsbältet för lösa delar eller skador, inklusive revor, slitna fläckar, böjda komponenter eller skadade spärrmekanismer, smuts eller skräp, före varje användning av elrullstolen. Om du upptäcker ett problem, kontakta din auktoriserade leverantör för underhåll och reparation.

Batterier och laddning

Din elrullstol använder ett långvarigt litiumjonbatteri. Detta batteri är förseglat och underhållsfritt. Eftersom det är förseglat är det inte nödvändigt att kontrollera elektrolytnivån (vätskenivån). Litiumjonbatterier är utformade för att hantera en längre och djupare urladdning. Även om de liknar bilbatterier, går de inte att byta ut emot varandra. Bilbatterier är inte konstruerade för att hantera en lång, djup urladdning, och är också osäkra för användning i elrullstolar.



OBLIGATORISKT! Batteriklämmor, poler och tillhörande tillbehör kan innehålla bly och blyföreningar. Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av batterier och tvätta händerna efter hantering.



WARNING! Kontakta din auktoriserade Pride-leverantör om du har några frågor angående batteriet i din elrullstol.

Ladda batteriet

Batteriladdaren är viktig för att ge ditt batteri så lång livslängd som möjligt. Den är utformad för att optimera din elrullstols prestanda genom att ladda batteriet säkert, snabbt och enkelt. Batteriladdaren fungerar endast när laddarens nätkabel är ansluten till ett eluttag.



FÖRBJUDET! Borttagning av jordningsstift kan skapa elektrisk fara. Om det behövs, använd en godkänd 3-fas nätadapter i ett eluttag med 2-fas nätadapter.



FÖRBJUDET! Använd aldrig en förlängningssladd för att koppla in batteriladdaren. Anslut laddaren direkt till ett korrekt anslutet eluttag.



FÖRBJUDET! Låt inte oövervakade barn leka i närheten av elrullstolen medan batterierna laddas. Vi rekommenderar att du inte laddar batterierna medan någon sitter på elrullstolen.



OBLIGATORISKT! Läs instruktionerna för batteriladdning i den här bruksanvisningen och i den bruksanvisning som medföljer batteriladdaren innan du laddar batterierna.



WARNING! Explosiva gaser kan bildas när batterierna laddas. Håll elrullstolen och batteriladdaren borta från antändningskällor som lågor eller gnistor och se till att det finns tillräckligt med ventilation när batterierna laddas.

WARNING! Du måste ladda din elrullstol batterier med den medföljande off-board-laddaren. Använd inte en batteriladdare ägnad för bilar.

WARNING! Kontrollera batteriladdaren, kablarna och kontakterna för skador före varje användning. Kontakta din auktoriserade leverantör om skador upptäcks.



WARNING! Försök inte öppna batteriladdarens hölje. Om batteriladdaren inte verkar fungera korrekt, kontakta din auktoriserade leverantör.

WARNING! Om batteriladdaren är utrustad med kylningshål, försök inte att sätta in föremål genom dessa hål.

WARNING! Var medveten om att batteriladdarens hölje kan bli varmt under laddningen. Undvik hudkontakt och placera inte på ytor som kan påverkas av värme.



WARNING! Om batteriladdaren inte har testats och godkänts för utomhusbruk, utsätt den inte för ogynnsamma eller extrema väderförhållanden. Om batteriladdaren utsätts för ogynnsamma eller extrema väderförhållanden, måste den få tid att anpassas till skillnaden i miljöförhållanden före användning inomhus. Se bruksanvisningen som medföljer batteriladdaren för mer information.

OBSERVERA: IGo+®-batteriet kan laddas med batterilådan antingen installerad på eller borttagen från strömbasen.

Ladda batteriet med hjälp av off-board-laddaren:


1. Placera elrullstolens framsida bredvid ett vanligt eluttag.
2. Försäkra dig om att strömmen till kontrollenheten är avstängd och att din elrullstol är försatt i körläge. Se "Din elrullstol".
3. Se till att batterilådans omkopplare är i "I" -läget.
4. Anslut off-board-laddaren till off-board-laddaruttaget/programmeringsuttaget på kontrollenheten. **Se figur 13.**
5. Anslut off-board-laddaren till vägguttaget.



WARNING! LED-lamporna på laddaren indikerar olika laddningsförhållanden vid olika tidpunkter: att laddaren är påslagen/ att laddningen är klar. Om LED-lampan inte visar att laddningen är klar inom 24 timmar, koppla ur laddaren från uttaget och kontakta din auktoriserade Pride-leverantör. Se bruksanvisningen som medföljer laddaren för en fullständig förklaring av dessa indikatorer.

6. När batteriet är fulladdat ska du koppla ur off-board-laddaren från eluttaget och sedan från kontrollenheten.

OBSERVERA: Batterimätaren på din elrullstols kontrollenhet visar en ungefärlig avläsning av batteristyrkan. Se Tabell 1 för koder för batteristatus.

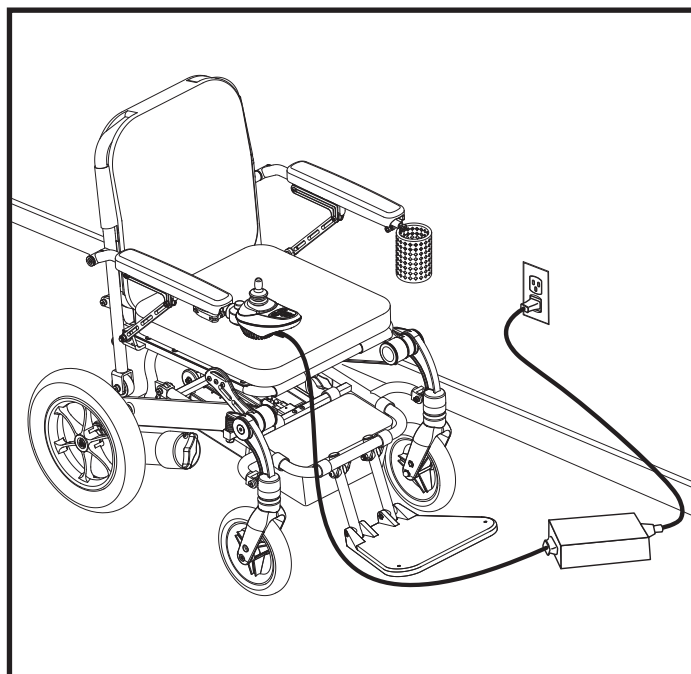

Figur 13. Batteriladdning med hjälp av off-board-laddaren

LED-lampor	Batteriprocent
5	55-100% återstående batteri
4	35-55% återstående batteri
3	20-34% återstående batteri
2	12-19% återstående batteri
1	<12% återstående batteri
1:a LED-lampan blinkar	<5% återstående batteri

Tabell 1. Batterimätarens koder


Ladda batteriet med batterilådan borttagen från strömbasen:

1. Ta bort batterilådan från strömbasen. **Se figur 4.**
2. Placera batterilådan bredvid ett vanligt eluttag.
3. Koppla in off-board-laddaren i batteriladdarens laddaranslutning. **Se figur 14.**
4. Anslut off-board-laddaren till vägguttaget.

OBSERVERA: Prides off-board-laddare har två lampor. Den röda lampan indikerar att strömmen till off-board-laddaren är på. Den gröna lampan indikerar att batteriet är fulladdat. Om din laddare inte är en av Prides off-board-laddare, följ instruktionerna från tillverkaren.

5. När batteriet är fulladdat ska du koppla bort laddaren från vägguttaget och sedan från batterilådan.
6. Sätt tillbaka batterilådan på strömbasen.

OBSERVERA: Stäng av strömmen till kontrollenheten innan du tar bort batterilådan.

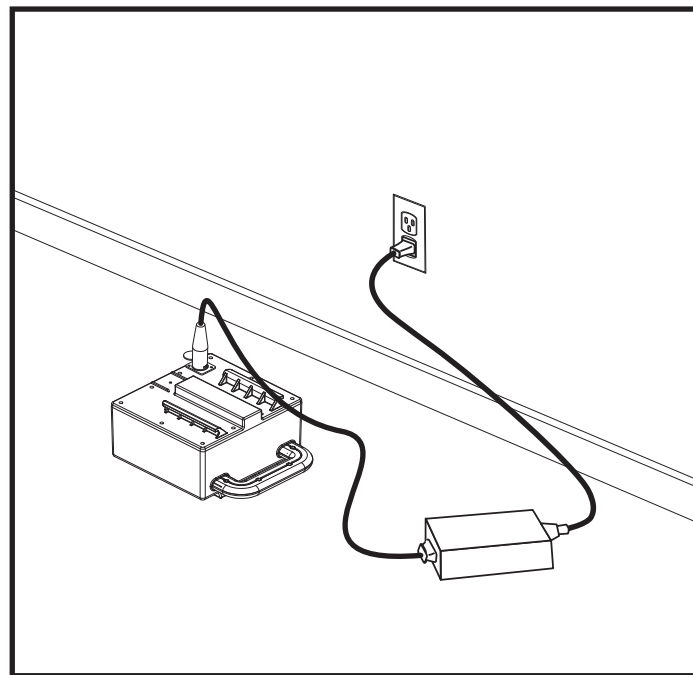

Figur 14. Batteriladdning med batterilådan

Vanliga Frågor

Hur fungerar laddaren?

Batteriladdaren tar standardeluttagsspänning (växelström) och omvandlar den till 24V DC (likström). Batteriet använder likström för att driva din elrullstol. När batterispänningen är låg arbetar laddaren hårdare för att ladda batteriet. När batterispänningen närmar sig full laddning arbetar laddaren inte lika intensivt för att slutföra laddningscykeln. När batteriet är fulladdat är strömstyrkan från laddaren nästan noll. På så sätt bibehåller laddaren hög laddning utan att överladda batteriet.

Kan jag använda en annan batteriladdare?

Du bör använda laddaren som medföljer elrullstolen. Det är den säkraste, mest effektiva utrustningen för att ladda batteriet. Vi rekommenderar inte att du använder andra typer av laddare (t.ex. en batteriladdare för bilar).

OBSERVERA: Laddaren på din elrullstol fungerar inte när batteriet är urladdat till nästan noll kapacitet. Om detta händer, ring en auktoriserad Pride-leverantör för assistans.

Hur ofta måste jag ladda batteriet?

Många faktorer spelar in när man bestämmer hur ofta batteriet ska laddas. Du kanske använder din stol hela dagen på en daglig basis, eller kanske du inte använder den på flera veckor åt gången.

■ Daglig användning

Om du använder din elrullstol dagligen, ladda batteriet så snart du är klar med din elrullstol. Din stol kommer att vara redo varje morgon för att ge dig en hel dags användning igen. Det rekommenderas att du laddar batteriet minst 8 till 14 timmar efter daglig användning. Pride rekommenderar att du laddar batteriet i ytterligare 4 timmar efter att batteriladdaren indikerar att laddningen är klar.

■ Oregelbunden användning

Om du använder din elrullstol sällan (en gång i veckan eller mindre) ska du ladda batteriet minst en gång i veckan i 12 till 14 timmar.

OBSERVERA: Håll batteriet fulladdat och undvik att ladda ur batteriet för mycket. Se bruksanvisningen som medföljer batteriladdaren för laddningsinstruktioner.

Hur kan jag få maximal räckvidd eller körtid per laddning?

Du kommer sällan att ha idealiska körförhållanden – jämna, platta, hårda drivytor utan vind eller kurvor. Ofta kommer du att stöta på kullar, trottoarsprickor, ojämna och löst packade ytor, kurvor och vind, som alla påverkar avståndet eller körtiden per batteriladdning. Nedan följer några förslag för att få maximal räckvidd per batteriladdning.

- Ladda alltid din elrullstol batterier helt före daglig användning.
- Planera din resväg i för tid för att undvika så många kullar och spruckna, trasiga eller mjuka ytor som möjligt.
- Begränsa din bagagevikt till endast viktiga föremål.
- Försök att upprätthålla en jämn hastighet medan din elrullstol är i rörelse.

Vilken typ av batteri ska jag använda?

Vi rekommenderar ett Pride-levererat litiumjonbatteri som är förseglat och underhållsfritt. Se tabellen med specifikationer för mer information om batteriet som används med din elrullstol.



WARNING! Det finns frätande kemikalier i batterier. Använd endast litiumjonbatterier för att minska risken för läckage eller explosiva förhållanden.

Varför verkar mitt nya batteri svagt?

Liksom nickel-kadmiumbatterier har litiumjonbatterier en "minneseffekt". Litiumjonbatterier är speciellt utformade för att ge ström, tömma sin laddning och sedan acceptera en relativt snabb laddning. Om batterierna laddas kontinuerligt efter att endast delvis har tömts, förlorar de sin förmåga att hålla en full laddning.

Vi har ett nära samarbete med vår batteritillverkare för att erbjuda batterier som bäst passar din elrullstol specifika elektriska krav. Nya batterier levereras fullt laddade till våra kunder. Under transporten kan batterierna stöta på extrema temperaturer som kan påverka deras ursprungliga prestanda. Värme minskar laddningen på batteriet; kyla saktar ned den tillgängliga strömmen och förlänger den tid som behövs för att ladda batteriet.

Det kan ta några dagar för temperaturen på din elrullstol batterier för att stabilisera och anpassa sig till deras nya rums- eller omgivningstemperatur. Ännu viktigare är att det tar några laddningscykler (en full tömning – sedan en full laddning) för att fastställa den kritiska kemiska balansen som är nödvändig för ett djupcykelbatteris toppprestanda och långa livslängd. Det kommer att vara värt det att ta sig tid att bryta batteriet ordentligt.

Hur kan jag säkerställa maximal batterilivslängd?

Ett fulladdat batteri ger tillförlitlig prestanda och förlängd batterilivstid. Håll din elrullstols batteri fulladdat när det är möjligt. Batterier som laddas sällan, laddas upprepade gånger efter endast delvisa urladdningar, eller lagras utan full laddning kan bli permanent skadade, vilket orsakar opålitlig elrullstolsdrift och begränsad batterilivstid.

OBSERVERA: Batteriets livslängd återspeglar ganska ofta den vård det får.

Hur bör jag lagra min elrullstol och dess batteri?

Om du inte använder din elrullstol regelbundet rekommenderar vi att du bibehåller batteriets livslängd genom att ladda batteriet minst en gång i veckan.

Om du planerar att inte använda din elrullstol under en längre tid, ladda batteriet helt före förvaring. Vrid batteribrytaren till läget "off" eller "0", koppla ur batteriet och förvara elrullstolen i en varm, torr miljö. Undvik extrema temperaturer, såsom alltför kalla eller varma förhållanden, och försök aldrig att ladda ett fruset batteri. Ett kallt eller fruset batteri bör värmas i flera dagar före laddning.

Vad gäller för kollektivtrafik?

De medföljande litiumjonbatterierna från Pride är utformade för användning i elrullstolar och andra mobilitetsfordon. Transport av objektet på kommersiella flygplan kan vara olaglig eller otillåten. Vi rekommenderar att du kontaktar flygbolagets informationsservice i förväg för att ta reda på deras specifika krav, och för att säkerställa att din elrullstol och dess litiumjonbatteri är tillåtna.

Vad gäller vid frakt?

Om du vill använda ett fraktföretag för att skicka din elrullstol till din slutdestination, packa din elrullstol i den ursprungliga förpackningen om möjligt och skicka batteriet i en separat låda.

Skötsel och underhåll

Din iGo+® är en avancerad elrullstol. Liksom alla motordrivna fordon, kräver den rutinmässiga underhållskontroller. Du kan själv utföra några av dessa kontroller, men för andra behövs assistans från en auktoriserad Pride-leverantör. Förebyggande underhåll är mycket viktigt. Om du genomför underhållskontrollerna i det här avsnittet som planerat, kan du försäkra dig om att din elrullstol ger dig årtal av problemfri användning. Om du har några funderingar kring din elrullstols skötsel eller användning, kontakta en auktoriserad Pride leverantör.



WARNING! Reparera inte elrullstolen när någon sitter i sätet.

Din elrullstol, som elektrisk utrustning i allmänhet, är känslig för skador från väderleken. Undvik fuktiga områden av alla slag.



WARNING! Direkt eller långvarig exponering för vatten eller fukt kan leda till att elrullstolen fungerar elektroniskt och mekaniskt. Vatten kan orsaka att elektriska komponenter korroderar och stolens ram korroderar. Stolstolar bör undersökas med jämna mellanrum för tecken på korrosion orsakad av exponering för vatten, exponering för kroppsvätska eller inkontinens. Skadade komponenter ska bytas ut eller behandlas omedelbart.

Om din elrullstol kommer i kontakt med vatten:

1. Torka din elrullstol så noggrant som möjligt med en handduk.
2. Låt din elrullstol sitta på en varm, torr plats i 12 timmar så att osynligt vatten förångas.
3. Kontrollera regulatorns drift och bromsarna innan du använder elstolen igen.
4. Om det finns några inkonsekvenser, ta din elrullstol till en auktoriserad stolthandlare. Elstolar som ofta utsätts för vattenkällor, såsom inkontinens, bör inspekteras ofta för korrosion och elektroniska komponenter kan behöva bytas ut ofta.

Temperatur

- Några av komponenterna i din elrullstol kan påverkas av extrema temperaturförändringar. Förvara alltid din elrullstol mellan temperaturerna -8°C (18°F) och 50°C (122°F).
- Vid extremt kalla temperaturer kan batteriet frysa. Den specifika temperatur vid vilken det fryser beror på ett antal faktorer, såsom batteriladdning, användning och typ av batteri (t.ex. litiumjon).

Allmänna riktlinjer

- Undvik att stöta till eller knuffa kontrollenheten.
- Undvik att utsätta din elrullstol för extrema förhållanden under längre tid, såsom värme, kyla eller fukt.
- Håll kontrollenheten ren.
- Kontrollera alla kontakter för att säkerställa att de är täta och sitter fast ordentligt.
- Om din elrullstol är så utrustad, se till att de pneumatiska däcken är uppblåsta till psi-/bar-/kPa-lufttrycksklassificeringen som anges på varje däck.



WARNING! Se till att de pneumatiska däcken är uppblåsta till psi-/bar-/kPa-lufttrycksklassificeringen som anges på varje däck. Ha aldrig för lite eller för mycket luft i dina däck. För lågt tryck kan leda till förlust av kontroll och överfyllda däck kan brista. Att ha för mycket luft i däck kan få dem att explodera.

WARNING! Använd inte en högtrycksslang för att blåsa upp dina däck.

- Använd ett gummibalsam på däckets sidor för att bevara dem längre.



WARNING! Använd aldrig en gummi-conditioner på däckens undersida; det kan göra däcken hala och få din elrullstol att glida.

- Alla hjullager är smorda med smörjmedel och förseglade. De kräver ingen efterföljande smörjning.
- Kontrollera alla elektriska anslutningar. Se till att de är sitter åt och inte visar spår av korrosion. Se batterikabelns etikett för korrekt kabeldragning.



WARNING! Även om elrullstolen har godkänts i de obligatoriska testerna för inträngning av vätskor, bör du hålla elektriska anslutningar borta från fuktkällor, inklusive direkt exponering för vatten eller kroppsvätskor och inkontinens. Kontrollera elektriska komponenter ofta för tecken på korrosion och byt vid behov.

Dagliga kontroller

- Kontrollera joysticken när kontrollenheten är avstängd. Se till att den inte är böjd eller skadad och att den återgår till neutralt läge när du släpper den. Undersök gummiskyddet runt kontrollenhetens undersida för skador. Inspektera skyddet visuellt. Hantera inte eller försök att reparera det. Uppsök en auktoriserad Pride-leverantör om det uppstår ett problem.
- Inspektera kontrollenhetskabeln visuellt. Se till att den inte är sliten, skuren eller att några ledningar är exponerade. Uppsök en auktoriserad Pride-leverantör om det uppstår ett problem.
- Kontrollera att du inte har punkteringar på solida däck. Punkteringar kan påverka stabiliteten negativt.
- Undersök sätessystemet, armstöden och de främre riggarna efter lösa komponenter, belastningspunkter eller skador. Uppsök din auktoriserade Pride-leverantör om det uppstår ett problem.

Veckovisa kontroller

- Kontrollera kontrollenheten och laddarens kontakter för korrosion. Kontakta din auktoriserade leverantör om det behövs.
- Se till att alla delar av kontrollenhetssystemet är ordentligt fastsatta i din elrullstol. Dra inte åt några skruvar för hårt.
- Kontrollera för korrekt däckinflation, om utrustad med pneumatiska däck. Om ett däck läcker luft, kontakta din auktoriserade leverantör för byte av innerslangen.
- Kontrollera bromsarna. Detta test bör utföras på en plan yta med minst 1 meters utrymme i alla riktningar runt din elrullstol.

För att kontrollera bromsarna:

1. Slå på kontrollenheten och vrid ned hastighetsnivån på din elrullstol.
2. Efter en sekund, kontrollera batterimätaren. Se till att den fortsätter vara på.
3. Tryck långsamt kontrollenheten framåt tills du hör att de elektriska bromsarna klickar. Släpp omedelbart kontrollenheten. Du måste kunna höra att varje elektrisk broms fungerar inom några sekunder efter att du rör kontrollenheten. Upprepa detta test tre gånger, tryck kontrollenheten bakåt, sedan vänster och sedan höger.

Månatliga kontroller

- Kontrollera att anti-tipphjulen inte skrapar mot marken när du använder elrullstol. Justera dem vid behov.
- Kontrollera däckslitage. Uppsök din auktoriserade leverantör för reparation.
- Undersök länkhjulen för slitage. Byt ut dem efter behov.
- Kontrollera om hjulgafflarna är skadade eller är ostadiga, vilket indikerar att de kan behöva justeras eller att hjullagren bör bytas ut. Uppsök en auktoriserad Pride-leverantör för reparation.
- Undersök hela elrullstolen för lösa komponenter och förändringar av elrullstolens funktion eller prestanda. Uppsök din auktoriserade Pride-leverantör för underhåll och reparation.
- Håll din elrullstol ren och fri från främmande material, såsom lera, smuts, hår, mat, dryck, etc.

Årliga kontroller

Ta din elrullstol till din auktoriserade leverantör för årligt underhåll, särskilt om du använder din elrullstol dagligen. Detta bidrar till att din elrullstol fungerar korrekt och hjälper till att förhindra framtida komplikationer.

Lagring

Din elrullstol ska förvaras på ett torrt ställe, fritt från extrema temperaturer. När du förvarar, koppla ur batteriet från elektrostolen och vänd batteribrytaren till "0" -läget. Se "Batterier och laddning."



WARNING! Om du inte förvarar enheten korrekt kan ramen korrodera och elektroniken kan skadas.

Batterier som regelbundet och djupt urladdas, sällan laddas, lagras i extrema temperaturer, eller lagras utan full laddning kan ta permanent skada, vilket orsakar opålitliga prestanda och begränsad livslängd. Det rekommenderas att du laddar din elrullstol batterier regelbundet under perioder av långvarig lagring för att säkerställa korrekt prestanda.

För långvarig lagring kan du placera flera brädor under din elrullstolens ram för att höja den från marken. Detta tar vikten av däckens och minskar risken för punkteringar på däckens områden som kommer i kontakt med marken.

Kassering av din elrullstol

Din elrullstol måste kasseras enligt gällande lokala och nationella lagstadgade föreskrifter. Kontakta ditt lokala kommunkontor eller auktoriserad leverantör för information om korrekt kassering av förpackningar, metallramskomponenter, plastkomponenter, elektronik, batterier, neopren-, silikon- och polyuretanmaterial.

Ramrengöring och desinfektion

- Använd en fuktig trasa och milt, icke-slipande rengöringsmedel för att rengöra plast- och metalldelarna på din elrullstol. Undvik att använda produkter som kan repa ytan på din elrullstol.
- Rengör vid behov produkten med ett godkänt desinfektionsmedel. Se till att desinfektionsmedlet är säkert för användning på din produkt före applicering.



WARNING! Följ alla säkerhetsanvisningar för korrekt användning av desinfektionsmedel och/eller rengöringsmedel innan du applicerar dem på din produkt. Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter kan leda till hudirritation eller att klädsel och/eller elrullstolens ytbehandling försämras i förtid.

Dynrengöring och desinfektion

Dynorna kan enkelt rengöras.



WARNING! Använd inte blekmedel när du tvättar dynorna. Det kan skada dynorna.

WARNING! Följ alla säkerhetsanvisningar för korrekt användning av desinfektionsmedel och/eller rengöringsmedel innan du applicerar dem på din produkt. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan leda till hudirritation eller att klädseln och/eller stolens ytskikt försämras i förtid.

Att rengöra dynorna:

1. Ta bort dynorna genom att lossa kardborrebanden som håller fast dynorna och dra sedan dynorna mot dig.
2. Använd en fuktig trasa och ett milt, icke-slipande rengöringsmedel, punktrensar dynorna efter behov.
3. Låt dynorna lufttorka.



WARNING! Sänk aldrig ned dynorna i vatten. Det kan skada dynorna.

WARNING! Försök inte att lägga dynorna i en torktumlare. Detta kan orsaka krympning.

4. När dynorna är torra, placera dynorna så att kardborrebanden är vända mot sätet och ryggstödet. Placera dynan över eventuella svankstöd och fäst sedan dynorna på sätet och ryggstödet med hjälp av kardborrebanden.

Hjulbyte

Om din stol är utrustad med en solid däckinsats, måste du byta ut hela hjulenheten. Om du har pneumatiska däck kan du byta ut däcket eller slangen. Nya hjulenheter är tillgängliga via en auktoriserad Pride-leverantör.

WARNING! Hjulen på din elstol ska endast servas av en auktoriserad Pride Provider eller en kvalificerad tekniker.

WARNING! Se noga till att strömmen till kontrollenheten är avstängd och att elrullstolen inte befinner sig i frihjulsläge innan du utför denna procedur.



WARNING! När du byter däck, ta bara bort hjulskruven och brickan i mitten och ta sedan bort hjulet. Om ytterligare nedmontering krävs, töm däcket helt annars kan det explodera.

För att byta hjul:

1. Stäng av strömmen till kontrollenheten.
2. Sätt upp elrullstolen på block.
3. Ta bort hjulmuttern och brickan från axeln. **Se figur 15.**
4. Om du byter ett pneumatiskt däck, töm det helt innan du tar bort hjulet.
5. Ta bort den gamla slangen från det pneumatiska däcket och byt ut den mot en ny slang, eller byt ut hela monteringen om det är ett däck av solid typ.
6. Placera det nya hjulet på axeln. Se till att axelnyckeln är i axelspåret.

WARNING! Se till att axelnyckeln är korrekt installerad i axelspåret när du monterar hjulet. Om det inte monteras säkert kopplas bromssystemet ur vilket kan orsaka personskada och/eller produktskada.




7. Blås upp det pneumatiska däcket till psi-/bar-/kPa-lufttrycksklassificeringen som anges på varje däck.
8. Sätt tillbaka hjulmuttern och brickan på axeln och dra åt.



WARNING! Se till att både muttern och brickan monteras och spänns ordentligt.

9. Ta bort elrullstolen från blocken.

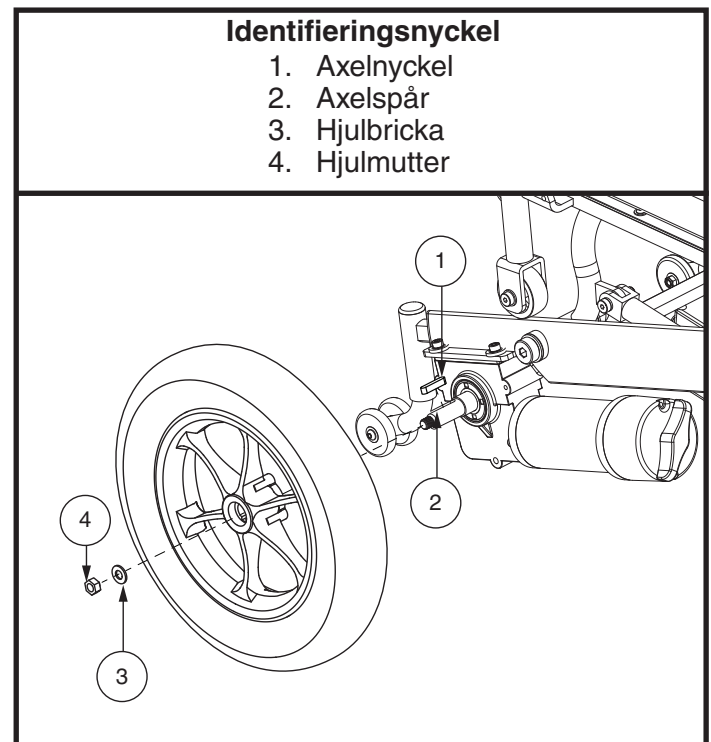

Figur 15. Hjulbyte

Batteribyte

Ett batterikopplingsschema är tryckt på en dekal som sitter inuti batterilådan. Se produktspecifikationerna för korrekta batterispecifikationer.



OBLIGATORISKT! Batteripolerna och tillhörande tillbehör kan innehålla bly och blyföreningar. Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av batterier och tvätta händerna efter hantering.

WARNING! Batteriet i din elrullstol får endast repareras eller bytas ut av en auktoriserad Pride-leverantör eller en kvalificerad tekniker.





WARNING! Byt inte batteriet när någon sitter i sätet.

WARNING! Batterierna till elrullstolen kan vara tunga. Se produktspecifikationerna. Om du inte kan lyfta så tungt, se till att få assistans av en person till. Använd rätt lyftteknik och undvik att lyfta mer än du orkar.



FÖRBJUDET! Håll verktyg och andra metallföremål borta från batteripolerna. Kontakt med verktyg kan orsaka elektriska stötar.

OBSERVERA: Kontakta din auktoriserade Pride-leverantör om du vill byta batteri på en elrullstol.

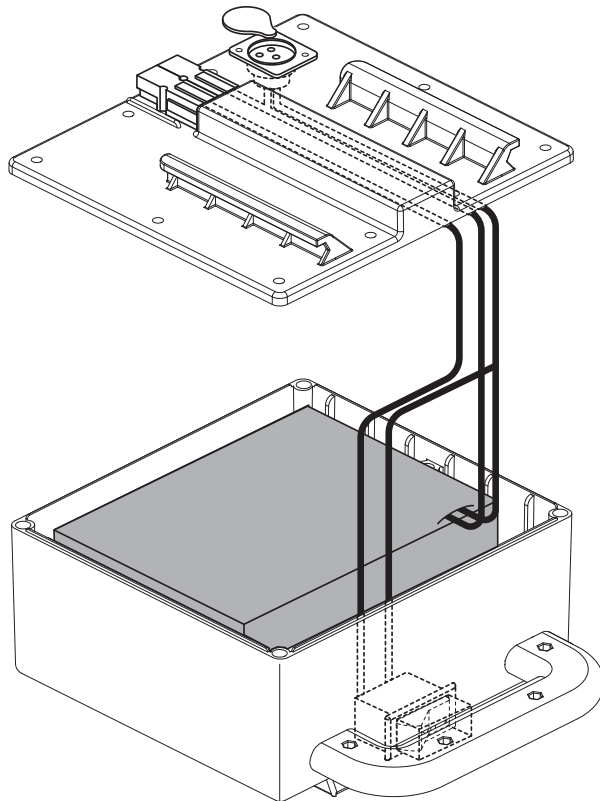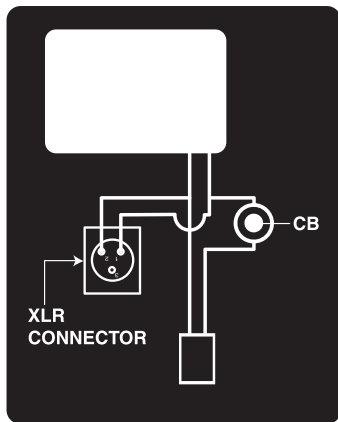

Figur 16. Batterilåda

När ska du uppsöka en auktoriserad Pride-leverantör för underhåll och reparation?

Följande symtom kan indikera ett allvarligt problem med din elrullstol. Om det behövs, kontakta en auktoriserad Pride-leverantör. När du ringer dem, ha modellnummer, serienummer, typ av problem och felkoden (om du har en sådan) tillgängliga.

- Motorbuller
- Slitna kablar
- Spruckna eller trasiga kontakter
- Ojämnt slitage på något av däck
- Ryckig rörelse
- Elrullstolen drar åt ena sidan
- Böjda eller trasiga hjuldelar
- Startar inte
- Startar, men rör sig inte
- Löst säte, eller sätesdelar

Korrigerande underhåll

Om batteriindikatorn inte tänds när du slår på strömmen:

- Kontrollera kabelanslutningarna. Se till att de sitter åt.
- Kontrollera strömbrytaren. Återställ den om det behövs.
- Kontrollera batterianslutningarna.

Om kontrollerna ovan ger normala resultat kan du testa batteriet med en batteritestare. Dessa testare finns i vanliga butiker som säljer fordonsdelar. Koppla ur batteriet före testning och följ anvisningarna som följer med testaren. Om batteriet inte klarar testet, byt ut det. Om din elrullstol fortfarande inte startar, kontakta en auktoriserad Pride-leverantör.

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.pridemobility.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.pridemobility.ca

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand

Unit 5/208 Swanson Road
Henderson, Auckland 0610
www.pridemobility.co.nz

UK

(Authorised UK Representative)
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

The Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.pride-mobility.nl
www.pridemobility.eu

Italy

Via del Progresso-ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.pridemobility.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.pridemobility.de

China

Room 508, Building #4, TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road, Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn

Produktens serienummer



UDI-etikett (om tillämpligt)