

Veelzijdig, sterk presterend, en Reisklaar



GO GO
ELITE TRAVELLER® PLUS



Simpele demontage

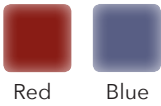
Met zijn klasse en prestaties ondersteunt de Go-Go Elite Traveller Plus uw actieve levensstijl. Standaard inbegrepen zijn een omlopend deltastuur met wikkelhandgrepen, vederlichte demontage, zwarte banden die geen strepen achterlaten, een mand aan het stuur en een grote 18 AH-batterijkoffer.

Het draagvermogen van 147 kg en een maximumsnelheid van meer dan 6 km/u maken de veelzijdige Go-Go Elite Traveller Plus compleet.

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Specificaties

3W: SC53 4W: SC54

MAXIMALE BELASTING	147 kg
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
BODEMVRIJHEID ²	38 mm
DRAAICIRKEL ²	3W: 876 mm 4W: 1162 mm
LENGTE ²	3W: 1016 mm 4W: 1023 mm
BREEDTE ²	540 mm
VOORBANDEN	2" x 8" massief
ACHTERBANDEN	3" x 9" massief
ACTIERADIUS PER LAADBEURT ^{1,4}	Tot 20,25 km
TOTAAL GEWICHT ZONDER ACCU'S	3W: 39,2 kg 4W: 39,5 kg
ZWAARSTE STUK, INDIEN GEDEMONTEERD	3W: 14,7 kg (voorstuk) 4W: 15,9 kg (voorstuk)
STANDAARD ZITTING	Type: Neerklapbaar, compact, kunststof vormdelen overtrokken met vinyl Gewicht: 10 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: 432 x 432 mm
AANDRIJVING	Gesloten differentieel, 24-volt DC motor
DUBBEL REM SYSTEEM	Regeneratief en elektromechanisch
ACCU'S ^{3,5}	2 (12 V) diepe cyclus (standaard) Capaciteit: 2 x 18 AH (standaard) Gewicht: 18 AH: 13,2 kg (accu pack)
ACCU LADER	2-amp, extern
KLEUREN	2 kleurkappen bij elke scootmobiel! 

Kenmerken

- Feather-touch demontage waardoor eenvoudige frame scheiding met slechts een hand mogelijk is
- Deltastuur met doorlopende handvaten
- Exclusieve banden die geen strepen achterlaten
- Automatische elektrische connectie tussen voor- en achterframe
- Standaard inbegrepen bij elke scootmobiel: Twee sets makkelijk om te wisselen plastic kappen in de kleuren rood en blauw
- Grote stabiliteit door montage van de stoel op de voorste helft van de scootmobiel
- Scootmobiel is zo gedemonteerd in 5 super lichte onderdelen wat het vervoeren en opbergen extra makkelijk maakt
- Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud
- Elektronica met microprocessor garandeert optimaal batterijgebruik, gemoderniseerd met extra beveiligingen
- Mand met stuurbevestiging
- Extra bergruimte in uitneembare mand op het voetbord, bij het stuur (alleen bij de 4 wiel scootmobiel)
- Met de handige externe oplader kan de accubox zowel binnen- als buitenboord worden opgeladen.

Accessoires

- 18AH accukoffer (extra reserve)
- Stokhouder (enkel of dubbel)
- Mobiele telefoonhouder
- Bekerhouder
- Onderarmsteun voor krukken
- 1270 mm heupgordel
- Zuurstoffleshouder
- Achtermand
- Achteruitkijkspiegel
- Zadeltas
- Veiligheidsvlag
- Onder stoel opslag (montage nodig)
- Rollator houder
- Weerhoes
- Wishbone-krukhouders
- XLR USB oplader

1) Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.

2) Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

3) AGM of Gel-Cell type vereist.

4) Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

5) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.

Pride Mobility Products Europe BV

De Zwaan 3

1601 MS Enkhuizen

The Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039

pridemobility.eu • info@prideeurope.nl